01 / ORIENTAÇÕES DE USO

Manobras básicas

Posicionamento e transferência entre superfícies

1 Posicionar o PASSANTE®

Posicionar o paciente em decúbito lateral, colocando o PASSANTE® sob o lençol móvel, o mais embaixo possível do paciente, de forma que o mesmo fique com mais da metade do corpo sobre o PASSANTE®.





2 Transferir o paciente

Com o paciente deitado sobre o PASSANTE®, enquanto uma pessoa puxa o paciente pelo lençol, a outra ajuda empurrando-o, junto com o lençol, para a outra superfície.





01 / ORIENTAÇÕES DE USO

Manobras básicas

Retirada e transporte do produto

3 Retirar o PASSANTE®

Assim que o paciente estiver sobre a outra superfície desejada, posicioná-lo em decúbito lateral, retirando o PASSANTE®.





4 Transportar o produto

O PASSANTE® poderá ser transportado a tiracolo, quando tiver que ser levado para as diversas unidades do hospital.





02 / ORIENTAÇÕES DE USO

Manobras em desníveis

Com o PASSANTE®, independente dos desníveis entre cama e maca, o paciente será transferido num bloco único. Basta aproximar o paciente o máximo possível da lateral da cama, puxando-o pelo lençol móvel. Em seguida, colocar a maca paralela à cama, freá-la e aguardar que o grupo do lado oposto faça a manobra de decúbito lateral do paciente, utilizando para tal o lençol móvel (ou o lençol de revestimento do colchão).









02 / ORIENTAÇÕES DE USO

Manobras em desníveis

Continuação da demonstração

Com o paciente encostado no PASSANTE®, o grupo da cama fará uma manobra de levantar e empurrar o paciente, através do lençol móvel, enquanto o grupo da maca puxa o paciente pelo lençol móvel.









03 / INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Especificações e cuidados


Descrição técnica

Prancha confeccionada em polímero expandido de formato retangular, dobrável, desmontável e lavável, com dimensões de 170 cm de comprimento × 50 cm de largura × 2 cm de altura, revestida por material teflonado, dotada de ponteiras que revestem as suas extremidades, com alças para o transporte e sustentação, sendo que a prancha em sua extensão é recoberta por material resinado, permitindo um deslizamento suave sobre a prancha num sistema rolante, isto é, rola sobre si mesma, fazendo com que a prancha se desloque no mesmo sentido em que gira o material resinado, transportando consigo o que estiver sobreposto. Suporta pacientes acima de 150 kg.

DIMENSÕES	PESO APROXIMADO
170 × 50 × 2 cm	**2,98 kg**

Limpeza

- Álcool 70%
- Escova com sabão neutro
- Sob consulta à CCIH.

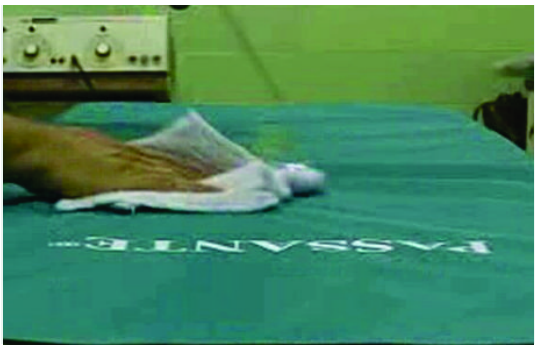

Armazenamento

O PASSANTE®, quando não estiver em uso, poderá ser pendurado pelas alças ou mantido em local visível pelos demais usuários.
No almoxarifado, empilhamento máximo: 4 caixas.

PRECAUÇÕES

Antes de utilizar o PASSANTE®, leia atentamente as instruções de manobras ou visualize o vídeo que acompanha o produto, disponível também no site indicado neste catálogo.

REGISTRO NO MS: 80390180001